

Het gebruik van het **Tristel Trio™ Wipes System** voor de ontsmetting van GI Manometrie Katheters

Voorafgaand aan het ontsmettingsproces, naar deze notities verwijzen.

- Desinfecteer de handen en draag handschoenen tijdens het werken met ontsmettingsmiddelen en medische instrumenten.
- Houd de zakjes van de gebruikte doekjes naast het Record Book zodat de details kunnen worden opgeschreven aan het einde van elk ontsmettingsproces.
- Gooi de gebruikte doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met richtlijnen van het ziekenhuis.
- Het ontsmettingsgebied dient in 'schoon' en 'niet schoon' te worden verdeeld.
- Plaats het niet schone katheter in het 'niet schoon' gebied alvorens met de ontsmetting te beginnen.
- Bereid het ontsmettingsproces voor door elk van de doekjes en het Aktivatorschuim uit de doos te pakken.



REINIGING




Stap 1 - Verwijder het reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 2 - Reinig het katheter van 'schoon' naar 'niet schoon': begin bij de accu en werk richting het uiteinde van het katheter. Plaats het katheter in het 'niet schoon' gebied.

Desinfecteer handen en draag een nieuw paar handschoenen.


HOOG-NIVEAU ONTSMETTING

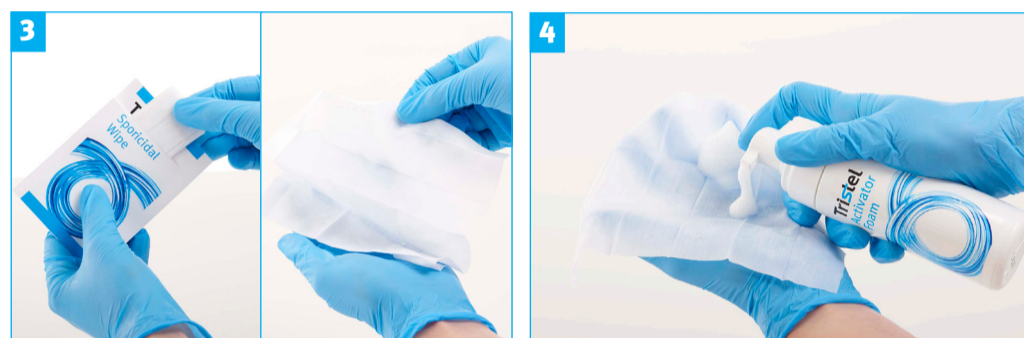

Stap 3 - Verwijder het sporicide doekje het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 4 - Breng twee doses Aktivatorschuim aan op het doekje.

HOOG-NIVEAU ONTSMETTING

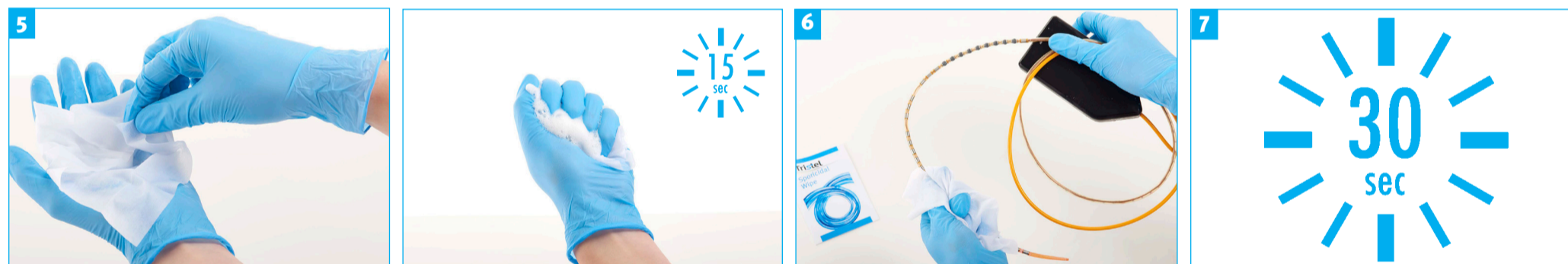

Stap 5 - Vouw het doekje en knijp gedurende 15 seconden om chloordioxide te genereren. Het gehele doekje dient met schuim bedekt te zijn.

Stap 6 - Ontsmet het katheter van 'schoon' naar 'niet schoon': begin bij de accu en werk richting het uiteinde van het katheter. Alle oppervlakken van het instrument dienen tenminste een keer met het doekje in contact te komen.

Stap 7 - Plaats het katheter in het 'schoon' gebied en observeer een de 30-seconden contacttijd.

NASPOELING



Stap 8 - Verwijder het spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 9 - Spoel het catheter om ontsmettingsmiddel te verwijderen en plaats het terug in het 'schoon' gebied of in een Tristel Protect transportzak.

TRACEREN & TRANSPORT



Stap 10 - Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Aktivatorschuim om het Record Book in te vullen.

Stap 11 - Het katheter is nu klaar voor hergebruik of opslag.

Tristel Protect wordt aanbevolen voor veilig transport naar de volgende patiënt.